

Explicação dos símbolos

Símbolo Indicação



Este dispositivo cumpre os requisitos da Diretiva relativa a dispositivos médicos (93/42/CEE).



Fabricante



Siga as instruções de utilização!



Usar até



N.º de série



Dispositivo Médico









Identificador único do dispositivo



Importador



Indica que o material da embalagem é cartão não canelado (papelão)

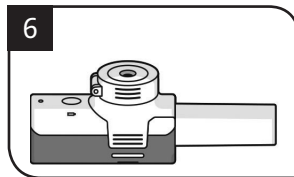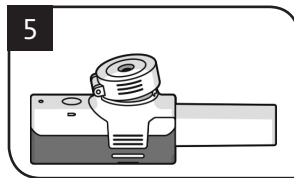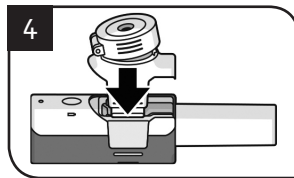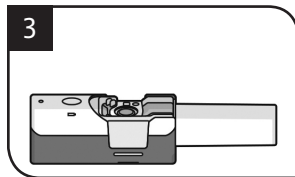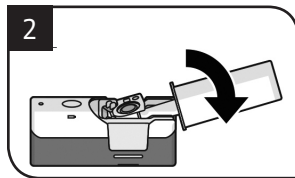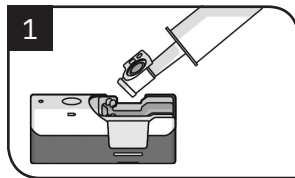

88282205

Breelib™

Monthly Pack

Instruções de utilização



Vectura Group Ltd

One Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH,
Reino Unido,
www.vectura.com



Vectura Ireland Limited

Block 2, Newtown Business and Enterprise Centre
Newtownmountkennedy
Co. Wicklow, A63 XV26
Ireland



08CN0200
280422



Packaging Technology Berlin GIRA
client: GVDE material-no.: 88282205
Reference-Code: 08CN0200
name: L-F-Breelib Monthly Consumables
colors: Black / CYAN / MAGENTA / YELLOW
version: 17.06.2022/03



page 1

PZ: 2782A-2

Bayer AG
code-no.:
IFU date: 280422

country: PT

dimension: 255 x 85 mm

1. Informação sobre segurança

⚠ Atenção

- ▶ O Breelib™ Monthly Pack é um acessório do Sistema de Inalação Breelib™. Antes de operar este dispositivo, leia todas as instruções de utilização do Sistema de Inalação Breelib™. Só é possível conseguir uma operação correta e segura se as instruções de utilização do Sistema

de Inalação Breelib™ forem seguidas.

- ▶ Não partilhe o seu Breelib™ com outras pessoas, uma vez que isso pode causar infeções. O Breelib™ é concebido para utilização num único paciente.
- ▶ Assegure-se de que o Breelib™ foi limpo e desinfetado devidamente antes da utilização conforme as instruções de utilização do Sistema de Inalação Breelib™.
- ▶ Não utilize os componentes da

Monthly Pack durante mais de um mês, para manter um desempenho constante.

- ▶ Não utilize o Breelib™ caso esteja danificado ou modificado. Utilize apenas acessórios fornecidos por um parceiro de assistência autorizado.
- ▶ Apenas o Vectura Group Ltd ou um parceiro de assistência autorizado pelo Vectura Group Ltd tem licença para proceder a reparações no Breelib™. O Vectura Group Ltd não pode ser responsabilizado por

quaisquer danos ou avarias resultantes de reparação não autorizada.

2. Conteúdo da embalagem

- ▶ Instruções de utilização (este documento)
- ▶ Boquilha
- ▶ Nebulizador

3. Utilização prevista

O Breelib™ Monthly Pack é um acessório do Sistema de Inalação Breelib™. O Breelib™ Monthly Pack só pode ser usado em

combinação com o Sistema de Inalação Breelib™. Para obter informações importantes relativamente à utilização prevista, às instruções gerais e à descrição do dispositivo, consulte as instruções de utilização do seu Sistema de Inalação Breelib™.

4. Armazenagem e transporte

Não são definidas condições especiais de armazenagem e transporte para o Breelib™ Monthly Pack.

5. Vida útil

Os componentes do Breelib™ Monthly Pack destinam-se a ser utilizados repetidamente. A vida útil do Breelib™ Monthly Pack é limitada a um mês.

6. Eliminação

Componentes do Monthly Pack podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico normal.

Bayer
882 822 05